

**BALANÇA DE CASA DE BANHO  
ELECTRÓNICA  
INSTRUÇÕES DE USO  
MODELO 7994**

## Balança de casa-de-banho electrónica

A sua nova balança foi desenhada para indicar com precisão o seu ganho ou perda de peso ao longo de um determinado período de tempo e deverá estar ao seu serviço durante muitos anos tendo em conta um uso normal.

## Especificação

Sistema sensor de peso de indicador de tensão de alta precisão.  
Plataforma em vidro temperado de segurança de 8 mm.  
Capacidade - 150 kg (330 lb/24 st).  
Graduação – 100 g/0.2 lb ou 50 g/0.1 lb (para modelo diferente).  
Ligação por contacto.  
Colocação automática a zero.  
Desligar automático.  
Indicador de sobrecarga.  
Indicador de bateria fraca.

## Alimentação


2 pilhas de lítio incluídas (CR2032).  
Retire a lâmina isoladora do contacto das pilhas antes de a usar.  
Substitua as pilhas quando a balança indicar “LO”.

## Funcionamento

PASSO 1. Coloque a balança sobre uma superfície plana e dura (evite as superfícies moles ou tapetes).

PASSO 2. Para ligar a balança, toque ligeiramente na plataforma de vidro e aguarde uns segundos. Aparecerá a indicação 0.0

Nota: O visor mostrará Err se subir para a balança antes que indique 0.0 ou 0.00. se isto ocorrer, comece de novo desde o passo 2).

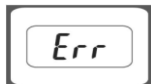

PASSO 3. Suba suavemente para a balança. Coloque os pés uniformemente sobre a mesma e não se mexa. Aguarde enquanto a balança calcula o seu peso. Aparecerá então como no exemplo: 58 kg e 500 g).




## Desligar automático

Quando sair da balança, esta apagar-se-á de forma automática. Desliga-se automaticamente quando o visor mostra '0,0', ou tendo a mesma leitura de peso transcorridos 6 segundos aproximadamente.

## Indicador de sobrecarga

Quando houver sobrecarga na balança (acima dos 150 kg), aparecerá o seguinte aviso:

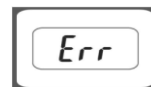

## Indicador de nível baixo das pilhas

Quando for necessário mudar as pilhas, aparecerá a seguinte indicação no visor:



Abra o painel traseiro da balança e extraia as pilhas cuidadosamente do seu compartimento, retirando-as dos contactos laterais. Não dobre os contactos ao fazê-lo para não se estragarem. Coloque as pilhas usadas em pontos de recolha apropriados.

## RECOMENDAÇÕES PARA EMPREGO E CUIDADOS COM A BALANÇA

A superfície pode escorregar se estiver molhada. Mantenha-a seca.

Este produto pode utilizar-se só mediante pressão estática. Evite danificar o vidro com algum golpe, impacto ou queda de objectos.

Limpe a balança com um pano húmido e impeça que penetre água no interior. NÃO utilize agentes de limpeza químicos. A parte do vidro que adere ao metal não deverá entrar em contacto com a água.

Mantenha a balança em lugar fresco e seco, evitando lugares húmidos ou muito quentes.

Mantenha sempre a balança em posição horizontal, nunca permitindo o apoio sobre um dos laterais.

Esta balança só pode utilizar-se para calcular o peso de pessoas. Não deve empregar-se em fins comerciais.

Trate a sua balança com cuidado: é um instrumento de pressão. Não a deixe cair nem salte sobre ela.